



ACH Medical
Achieving the Future

Коническое шестигранное соединение и поверхность S.L.A

Internal Bone Level - Tapered **IB^T System**

Переходная платформа


Значительно способствует сохранению маргинальной кости и прикреплению мягких тканей. Снижает риск воспалительной клеточной инфильтрации

Гибридная форма

Передаёт нагрузку на вершущу имплантата. Обеспечивает отличную первичную стабильность, особенно в мягких костях

Трёхгранная самонарезающая кромка

Обеспечивает плавное, атравматичное введение имплантата. Куполообразная вершуща имплантата снижает риск перфорации и точечной компрессии.

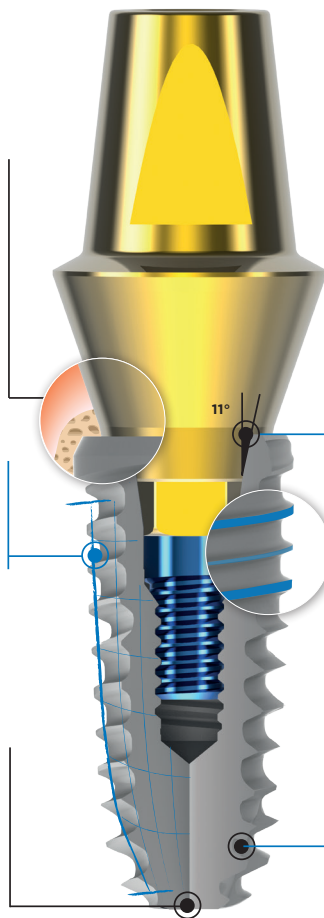

Коническое соединение с антиротационным внутренним шестигранником

Внутреннее 11° коническое соединение имплантат/абатмент — надёжное, самозатягивающееся, герметичное соединение, равномерное распределение нагрузки и минимизация микроподвижности

Гибридная двойная резьба

Позволяет проще и быстрее устанавливать имплантат в различные типы кости. Уменьшает стресс подлежащей кости во время введения и остеоинтеграции

Обработка поверхности S.L.A.

Пескоструйная обработка и кислотное травление, наиболее исследованные и проверенные технологии обработки поверхности



IB-T



TAPERED SHAPE



BLUE

SINGLE CONNECTION



Коническое шестигранное соединение и поверхность S.L.A

Коническое шестигранное соединение

Опубликованные литературные данные показали, что коническое шестигранное соединение по сравнению с внешним шестигранником или стыковым соединением обеспечивает более высокую механическую и биологическую стабильность, лучшее распределение давления, большую герметизирующую способность, адекватную стабильность гребня мягких тканей и костного гребня, повышенную универсальность протезирования и лучший эстетический результат


ACH Medical адаптировала 11-градусное коническое шестигранное соединение Морзе с 2008 года.

Поверхность S.L.A.


Как следует из публикации Wennerberg & Albrektsson в 2009 году, оптимальные результаты достигаются в узком диапазоне для умеренно шероховатых поверхностей со значениями Ra/Sa 1,0 2,0 мкм.

Поверхность ACH Medical Co., Ltd -это умеренно шероховатая поверхность (1,5-1,8 мкм), которая оптимальна для наращивания кости к имплантату.


Company N

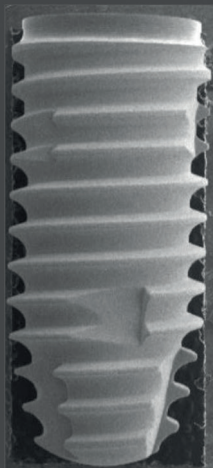


Company D

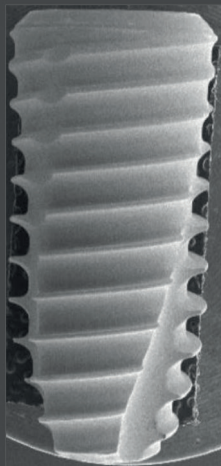


Company S

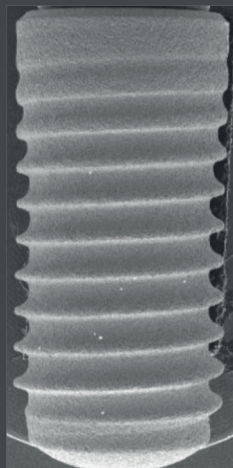

Company O

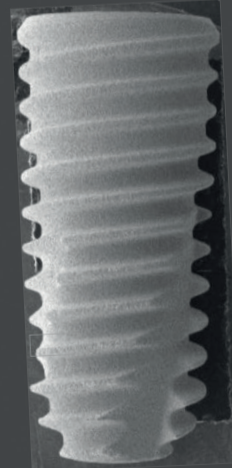


ACH

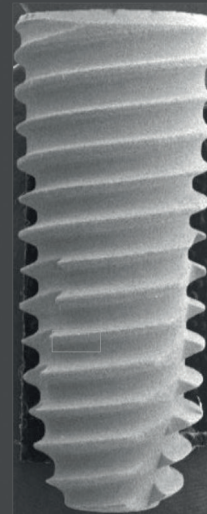


x13


Company N

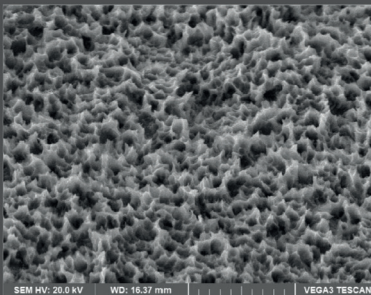


Company D

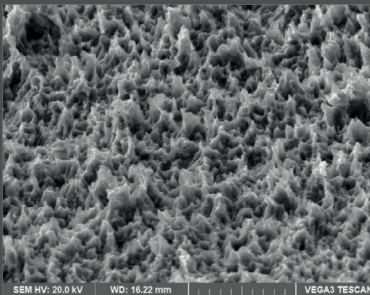


ACH

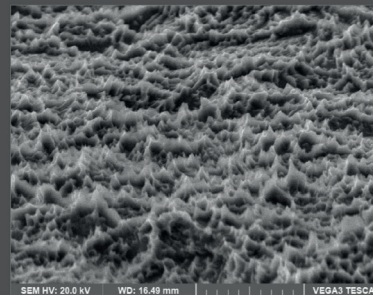

Company O

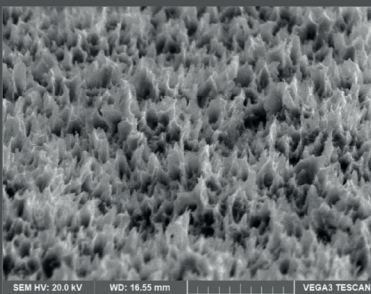

Company S

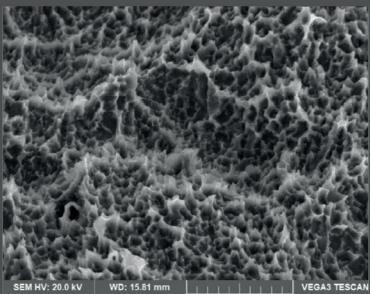

x3K

Поверхность S.L.A.

Как следует из публикации Wennerberg & Albrektsson в 2009 году, оптимальные результаты достигаются в узком диапазоне для умеренно шероховатых поверхностей со значениями Ra/Sa 1,0 2,0 мкм. Поверхность ACH Medical Co., Ltd -это умеренно шероховатая поверхность (1,5-1,8 мкм), которая оптимальна для наращивания кости к имплантату.



Коническое шестигранное соединение 11°


ACH (Имплантат)

ACH (Абатмент)




N (Имплантат)

N (Абатмент)

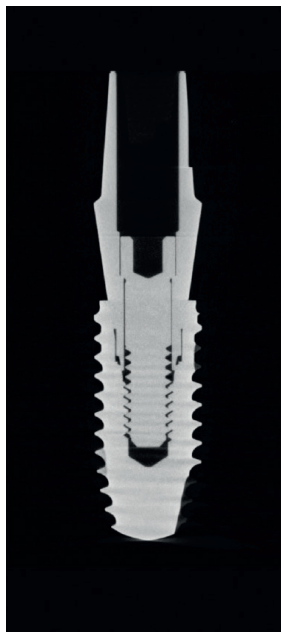

O (Имплантат)

O (Абатмент)

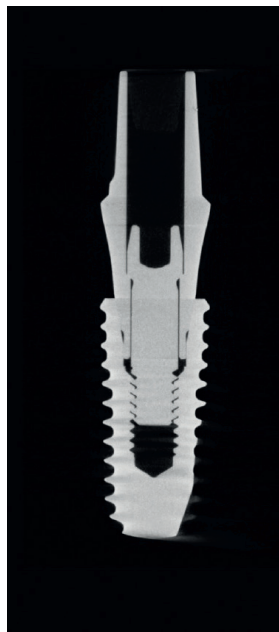


D (Имплантат)

D (Абатмент)




M (Имплантат)

M (Абатмент)

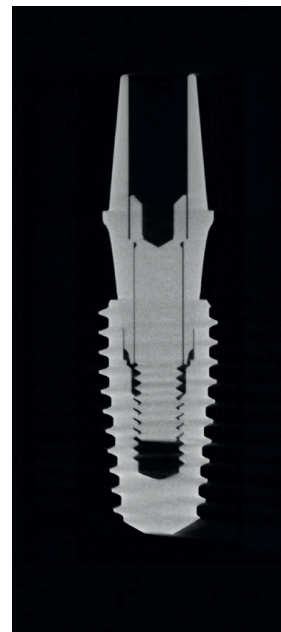



Коническое шестигранное соединение 11°

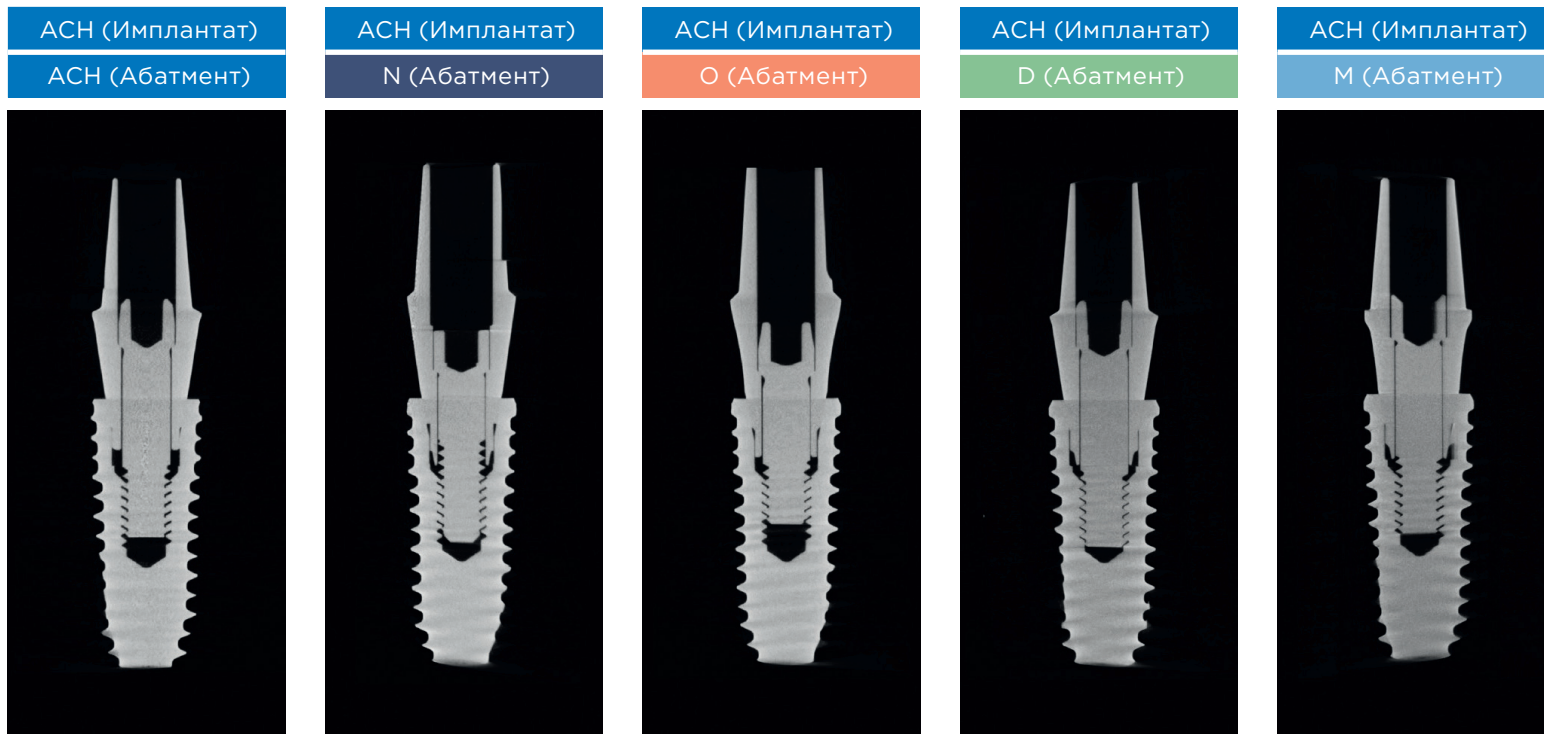



Эксклюзивный представитель
ООО «БОНА-ДЕНТ»

Телефон:

+7 495 104 77 73

e-mail: info@bona-dent.ru

www.bona-dent.ru